

ON VOUS EN PRIE DE LIRE
L'INSTRUCTIF AVANT D'UTILISER

ReWind®

anti-Cellulite laser

Instructions d'utilisation



ReWind®

anti-Cellulite laser



ÉTERNELLE®
PHARMA

PRÉCAUTIONS

- NE PAS APPLIQUER SUR LA PEAU IRRITÉE OU BLESSÉE.
- JAMAIS PLUS UTILISER PENDANT LA GROSSESSE.
- NE PAS LAISSER À PORTÉE DES ENFANTS.
- À SE GARDER ÉLOIGNÉ DE L'HUMIDITÉ.
- NE PAS DIRIGER AUX YEUX.

UNITÉ LASER ANTI-CELLULITIQUE

MARQUE: REWIND
MODÈLE : LACE-MK
9V \equiv 50mA

UTILISANT UNE BATTERIE RECHARGEABLE 9V

INCLUT ADAPTATEUR DE ca/cc
ENTRÉE: 120VAC 60HZ 15 W
SORTIE: DC9V 330mA



SERVICE CLIENTÈLE

ÉTERNELLE®

(52) (55) 21 22 21 16




Caractéristiques de Sécurité du Produit:

- Technologie Dermatologique laser Éternelle Pharma.
- Sûr laser divergent 650 nm.
- Control digital de Sortie de la Puissance.

Fabrique pour:

Marcas de Renombre, S.A. de
C.V. Francisco I. Madero No.70
Col. Héroes de la Revolución
Naucalpan Estado de México
C.P. 53840

www.eternellepharma.com

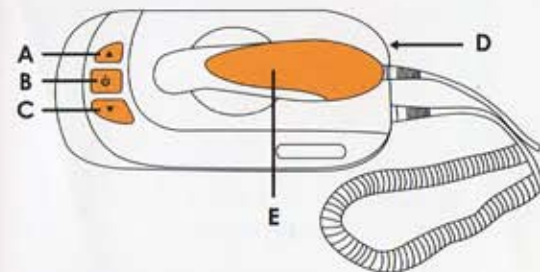

UNITÉ DE COMMANDE REWIND

- A-Augmenter Puissance.
- B-Allumé-Eteint ON/OFF.
- C-Ralentir Puissance.
- D-Entrée d'adaptateur secteur.
- E-Baguette.
- F-Adaptateur secteur.



REWIND BAGUETTE

- G - Sortie de Laser.

ANTI-CELLULITE LASER
TECHNOLOGY



1. Allumez l'appareil **ReWind® anti-Cellulite laser**



2. Ajustez le niveau d'intensité du laser **ReWind®** : pour avoir des meilleurs résultats, augmentez la puissance.



3. Appliquez du gel **Cellu aActive Body Resculpting Laser Gel** et distribuez-le sur les zones à traiter en donnant un massage doux et circulaire sur la peau contournée.



4. Une fois appliqué, passez le laser **ReWind® anti-Cellulite laser** à 5 cm de la peau tout au long de la zone à traiter.



5. Au moment d'être en contact, le faisceau de **ReWind®** laisse une sensation de chaleur qui indique que le traitement a commencé à travailler. En utilisant avec le gel, vous obtiendrez des meilleurs résultats.



6. Après quelques minutes la sensation de chaleur disparaîtra et la première partie du traitement sera finie. **ReWind®** est un produit qui peut aider à réduire des mesures et éliminer visiblement la peau d'orange, cellitique en cuisses, fesses, bras, le gras de la jambe et aussi du abdomen.



7. Répétez trois fois par semaine l'application du laser **ReWind®** et du gel **Cellu aActive** tout ensemble en laissant rester la peau un jour entre chaque application. Pour meilleurs résultats, soyez constant avec l'usage du traitement.



8. La deuxième partie du traitement **ReWind®**, c'est l'usage quotidien de la Crème de nuit **Cellu nuit Night Firming and Shaping** dans les zones où vous avez appliqué le laser au but de réduire des mesures et aider dans le processus d'élimination de la peau d'orange.

- ◀ Pendant l'usage vous sentirez une sensation de chaleur qui indique que le traitement a commencé à travailler.
- ◀ Un mouvement circulaire constant vous permettra de réussir meilleurs résultats.
- ◀ Le laser **ReWind®** peut être utilisé par hommes ou femmes mais ce n'est pas recommandable pour eux de moins de 18 ans.
- ◀ **ReWind® anti-Cellulite laser** pourra vous aider réduire cellitique, la peau d'orange. Pour accélérer le processus, c'est recommandable de boire 8 verres d'eau pendant la journée comme complément.

Compris :
1 appareil **ReWind® anti-Cellulite laser**, 1 Adaptateur secteur, 1 Crème **Cellu nuit Night**,
1 **Cellu aActive Body Resculpting Laser Gel**, 1 Instructif, 1 Instructif pour crèmes et gel, Garantie

*Des changements visibles de 6 à 8 semaines après l'usage.

Vous aurez les avantages d'un traitement de pointe avec un effet lipolitique draineur et de fermeté qui sculptera votre corps et combattra avec efficacité la peau d'orange.

Le système réducteur amincisseur *RENÉARD®* ANTI-CELLULITE LASER, développé par ETERNELLE PHARMA, a été conçu pour le profiter dans la commodité et l'infinité de votre maison.

La crème de nuit Cellunuit raffermie et tonifie la peau.

C'est un complément idéal du système *RENÉARD®* qui vous offre des résultats progressifs et visibles grâce à ses actifs de dernière génération.

C'est de la technologie spécialisée au service de la lutte contre l'apparition de la peau d'orange. La modulation de l'onde de l'émission de la lumière laser émette par le dispositif *RENÉARD®* aide à réduire la présence de la peau d'orange en réduisant les adiposités ce qui a rapporte une peau ferme, douce et tonifiée.