

3

UTILISER LE PEDI SPATM :

Allumez votre PEDI Spa™ et assurez-vous de bien le tenir en main. Dans un premier temps, appliquez lentement PEDI Spa™ sur la zone que vous souhaitez traiter. Lorsque vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez exercer un niveau de pression supérieur sur l'appareil. Appliquez lentement sur vos pieds, en faisant des arrêts réguliers pour vérifier les résultats.



AVANT
VOORAF



APRÈS
ACHTERAF

GEBRUIK VAN DE PEDI SPA™ :

Zet uw PEDI Spa™ aan en houd hem goed vast in uw hand. Breng de PEDI Spa™ eerst langzaam aan op de te behandelen zone. Wanneer u zich op uw gemak voelt, oefent u een hogere druk uit. Bewerk langzaam uw voeten en stop af en toe om het resultaat te bekijken.

4

Pour adoucir davantage la peau, exercez plus de pression lors de l'utilisation de l'appareil. ATTENTION : Dès que vous sentez que PEDI Spa™ touche de la nouvelle peau saine ou qu'un durillon a été réduit, arrêtez de l'utiliser. Dès que vous avez atteint les résultats escomptés, vous pouvez éteindre votre PEDI Spa™. Pour vider le réservoir de récupérateur de peaux mortes, tournez la la partie grattoir callosités dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ouvrez le plateau et videz le contenu dans une poubelle. ATTENTION : Pour utiliser le plateau Emery, merci de suivre toutes les étapes mentionnées ci-dessus et remplacez le réservoir récupérateur de peaux mortes par le plateau ponceur. PRECAUTION : Evitez d'utiliser de manière excessive votre unité car cela risquerait d'abîmer la peau de vos pieds ! En cas d'irritation ou de douleur, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Als u de huid nog zachter wilt maken, kunt u meer druk uitoefenen op het apparaat wanneer u het gebruikt.

BELANGRIJK: van zodra u voelt dat de PEDI Spa™ nieuwe gezonde huid aanraakt of een eeltplek werd met korting, stopt u het gebruik ervan. Zodra u het gewenste resultaat bereikt, schakelt u uw PEDI Spa™ uit. Om het scheerreservoir te ledigen, draai het lemmet in de omgekeerde richting van de wijzers van een klok, open het reservoir en ledig de inhoud in een vuilnisbak.

BELANGRIJK: om de polijstschiif te gebruiken, gelieve alle hierboven vermelde stappen te volgen en vervang het scheerreservoir door de polijstschiif.

WAARSCHUWING: vermijd het overdreven gebruik van uw PEDI Spa™ want dit zou de huid van uw voeten kunnen beschadigen! In geval van irritatie of pijn, stopt u onmiddellijk het gebruik ervan.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

ATTENTIE : Gooi dit apparaat niet bij het huishoudafval. Er bestaat in elke gemeente een selectief inzamelsysteem voor dit soort producten, vraag de wegwerppunten bij uw gemeente op. Elektrische en elektronische voorwerpen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid, daarom moeten ze recycled worden.



Importé par :
Geïmporteerd door :
Delta Partner's
8, rue Raphaël
92600 Asnières/Seine
France



PEDISPA


— UTILISATION —
— GEBRUIK —



Compartiment
pour les piles
Batterijhuisje

Ponceur
(zones plus sensible)
Polijssteen
(gevoeligste gebied)

Grattoir callosités
(broche en acier
inoxydable)
Eeltrasp
(lemmet in
roestvrij staal)

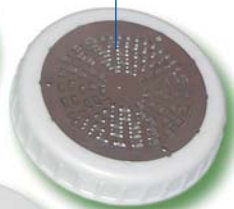

Réservoir
récupérateur de peaux mortes
Lade waarin alle dode huidcellen
worden opgevangen

Bouton Marche/arrêt
Aan/Uit knop




INSTALLER LES PILES :

- 1 - Retirez le couvercle ainsi que le compartiment pour les piles.
- 2 - Insérez 4 piles AA-RL6 (non fournies) dans le compartiment et vérifiez que les pôles sont positionnés dans le bon sens.
- 3 - Insérez de nouveau le compartiment dans la structure principale puis refixez le couvercle du compartiment dans la partie inférieure de l'unité Pedi Spa™.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN:

- 1 - Verwijder het deksel alsook het batterijhuisje.
- 2 - Plaats 4 batterijen AA-RL6 batterijen (niet meegeleverd) in het huisje, rekening houdend met de polariteit.
- 3 - Steek het batterijhuisje terug in het frame en bevestig opnieuw het deksel van het batterijhuisje aan de onderkant van de Pedi Spa™.

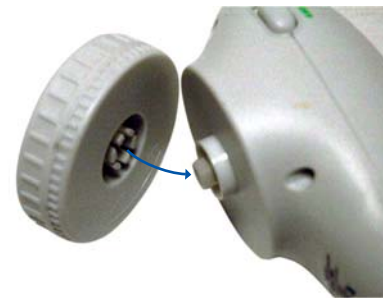

Installer le grattoir callosités avec le réservoir récupérateur peaux mortes :
Le fixer sur l'axe de rotation situé sur la partie inférieure du Pedi Spa™.
Vous pouvez également installer le ponceur sur le même axe de rotation de l'appareil.
Appuyez ensuite sur l'appareil pour qu'il se mette correctement en place.

Installeer de eeltrasp met de lade voor het opvangen van de dode huidcellen: Bevestig hem op de rotatie-as aan de onderkant van de Pedi Spa™.
U kunt ook de polijsteen op dezelfde rotatie-as van het apparaat installeren.
Druk daarna op de unit totdat het correct vastklikt.

